

MEDOVIS

Visionary Medical



Gut aufgelegt.
Das Plus an Sicherheit
auf dem OP-Tisch

OP-TISCHAUFLAGE
superabsorbierend, schnelltrocknend, ultrastark

MEDOVIS

Healthcare GmbH
Marktring 6 8523
Frauental

medovis.at


Sichere monopolare OP-TISCHAUFLAGE

Effiziente Assistenz im arbeitsreichen OP-Alltag. Mit der belastbaren, reißfesten Medovis Auflage werden auch schwere Patienten sicher auf den OP-Tisch und wieder zurück gebracht. Während des Eingriffs zeigt sie richtig, was sie kann: Blut, Sekret, Urin und andere Flüssigkeiten werden durch den hochabsorbierenden Saugkern sofort aufgefangen und in nur wenigen Sekunden sicher gebunden.


Die hautfreundliche, glatte Oberseite sorgt für eine trockene Liegefläche. Die hydrophobe, atmungsaktive Unterseite schafft eine Keimbarriere und somit ein Plus an Hygiene, da sie sowohl Patienten, Chirurgen, Personal und Equipment vor Kontamination schützt.

Die elektrische Isoliereigenschaft der Polyethylen Spezialträgerfolie ermöglicht den Patienten in der Hochfrequenz-Chirurgie sicher isoliert vom OP-Tisch zu lagern und dadurch Verbrennungen zu verhindern.

- **Einweg OP-Tischauflage mit extrem starkem Saugkern**
- **Geringer Reinigungsaufwand**
- **Deutliche Verbesserung der Hygiene**
- **Ökonomisch sinnvoll**
- **Leichte Positionierung des Patienten**
- **Patient liegt trocken**
- **Feuchtigkeitsabsorption 10000 ml**
- **Isolation zum OP-Tisch gegen HF-Strom**
- **Einmalprodukt / nicht steril**

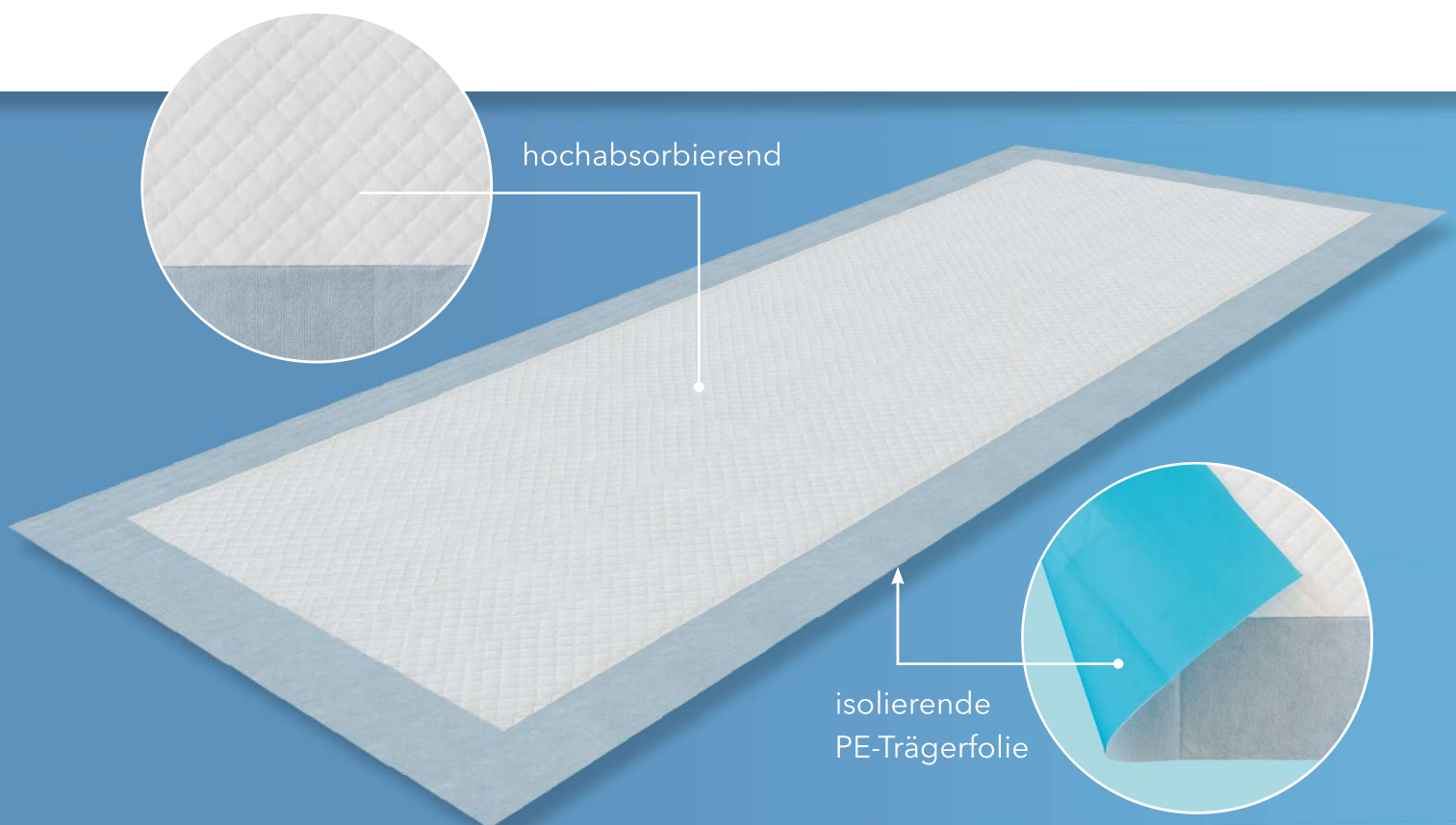

OP-TISCHAUFLAGE mit Saugkern

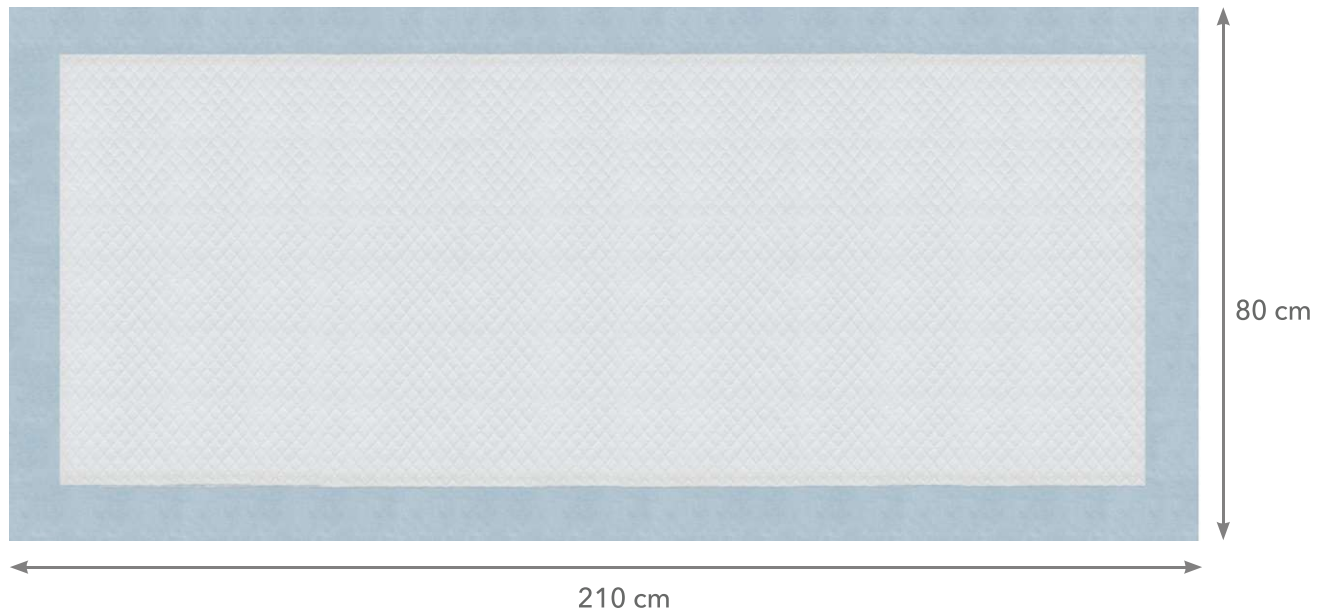

Barrierefremde Saugkraft
ohne Kleber und
Bindemittel



Gleichmäßige und
schnelle Bindung
von Flüssigkeiten



Hohe Atmungsaktivität
durch die Kombination
spezieller Oberflächen



Keimbindung und
-reduzierung im Kern



Einfaches Umlagern
des Patienten



Isolation
gegen HF-Strom

Anwendungsbereiche:

- Unfallchirurgie
- Notfallaufnahme
- Ambulanz
- Orthopädische Chirurgie
- Neurochirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- und vieles mehr

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/Ktn.
ME21081	OP-Tischauflage mit Saugkern, 265g/m ² , 210 x 80 cm	20