


## Livia

# 3,5 Fr Harnkatheter

für die Anwendung bei Frühgeborenen

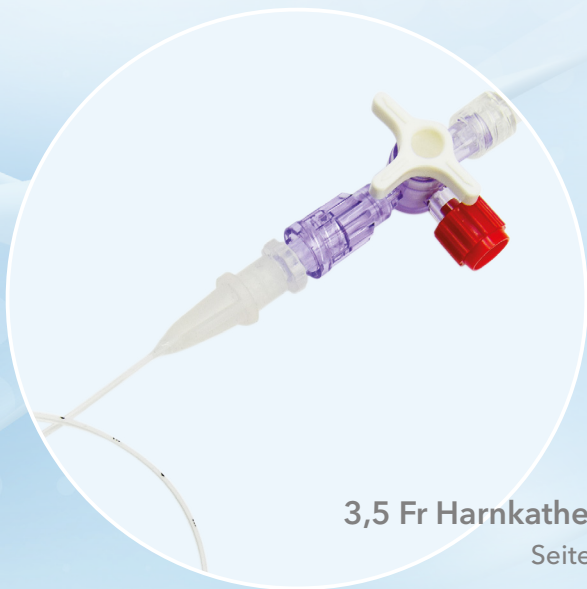


3,5 Fr Harnkatheter  
Seite 02



Sammelkatheter-Set  
Seite 03

## Livia 3,5 Fr Harnkatheter

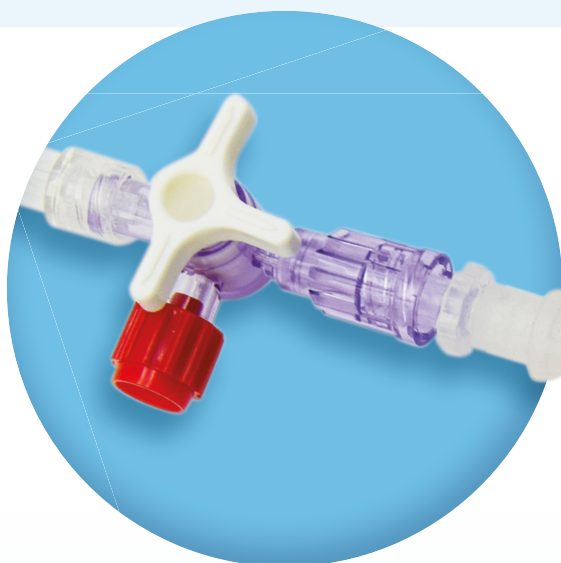

Der 3,5 Fr Livia Harnkatheter (Ø 1,2 mm) ist ein medizinisches Produkt, das speziell für die Anwendung bei Frühgeborenen entwickelt wurde. Mit dem Harnkatheter wird die Urinausscheidung des Frühgeborenen präzise gemessen und eine kontinuierliche Überwachung sichergestellt.

Der 3,5 Fr Livia Harnkatheter wird verwendet, um Urinkulturen und genaue Urinausscheidungen bei Frühgeborenen zu erhalten. Diese bevorzugte Harnableitungsmethode eliminiert die Unannehmlichkeiten und Messfehler, die mit dem Wiegen von Windeln verbunden sind. Der Harnkatheter ist ein geschlossenes Harnableitungssystem, der zur präzisen Urinausscheidung bei Frühgeborenen verwendet wird.

### Merkmale:

Der Silikonkatheter hat eine weiche Spitze, um Traumata beim Einführen zu reduzieren




Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250	3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10

## Livia 3,5 Fr Harnkatheter-Set



Das Livia Sammelkatheterset ist ein geschlossenes System, mit dem bei Frühgeborenen genaue Urinausscheidungen gemessen werden können. Das Livia Sammelkatheter-Set besteht aus einem vormontierten 3,5 Fr Silikon-Harnkatheter, einem Dreiwegehahn für Probenahmezwecke und einer 100-ml-Bürette zur genauen Messung der Urinausscheidung.

Das vorab montierte, sterile und geschlossene System minimiert das Risiko von Infektionen. Der Absperrhahn mit Injektionsstelle ermöglicht die kontaminationsfreie Probenahme im mittleren Strahl. Durch die Verwendung der 100-ml-Sammelbürette kann die Urinausscheidung präzise gemessen werden. Der Silikon-Blasenkatheter ist mit einer weichen Spitze ausgestattet, um Traumata beim Einführen zu reduzieren. Der Katheter ist auch separat erhältlich.

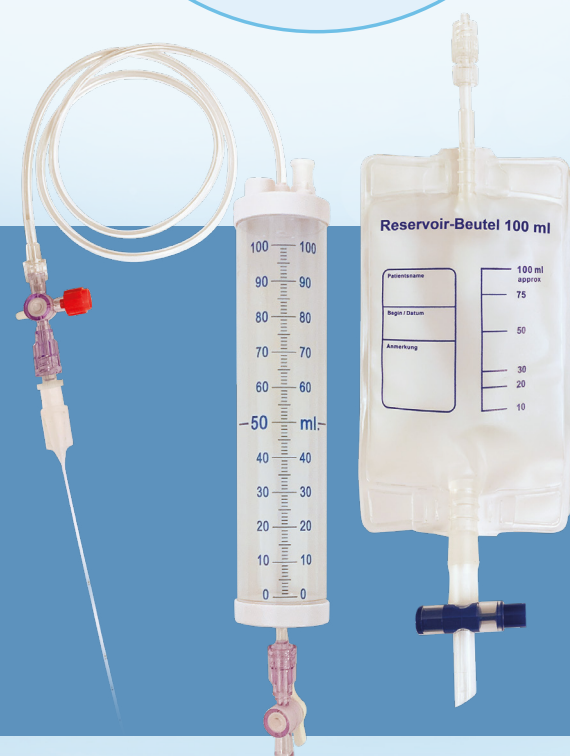

### Das Set besteht aus:

- Biokompatibler 3,5 Fr Harnkatheter
- Absperrhahn mit latexfreier Injektionsstelle
- 100-ml-Sammelbürette mit Ablasshahn
- 100-ml-Harnauffangbeutel

Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250-Set	3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10